

EN **Read the instructions carefully before use!**

GC Tooth Mousse

Water-based Sugar-free Tooth mousse with Recaldent™ CPP-ACP (Casein Phosphopeptide - Amorphous Calcium Phosphate)

Tooth mousse contents:

Pure water, glycerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Propylene glycol, Silicon dioxide, titanium dioxide, Xylitol, Phosphoric acid, Flavoring, Zinc oxide, Sodium saccharin, ethyl p hydroxybenzoate, Magnesium oxide, Guar gum, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p hydroxybenzoate.

Indications for use:

1. To reduce sensitivity after ultrasonic, hand scaling or root planning.
2. Prior to or following teeth bleaching treatment.
3. For low salivary pH level during pregnancy.
4. For patients suffering from xerostomia due to medical treatments or as a side-effect of medical treatment.
5. To treat dental white-spot lesions.
6. During or after orthodontic treatment.
7. For high-risk caries patients or patients with a low salivary pH level.
8. For protection of patients with frequent consumption of high-acidity drinks (energy drinks, sodas).
9. For patients suffering from teeth sensitivity.

Contra-indications:

RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Not for use of patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

Directions for use:

1. Prior to use, brush your teeth with standard toothbrush and toothpaste.

2. Extract a sufficient amount of mousse onto a clean and dry finger and apply to the teeth.
3. Wait for 3 minutes while avoiding spitting or swallowing saliva.
4. Use your tongue to apply the remnants of the mousse onto your teeth.
5. Spit the main left over mousses. The remaining residues will gradually dissolve. Avoid eating or drinking for at least 30 minutes. The more the application time lasts, the greater the activity of the mousse will be.

Tooth Mousse use frequency:

Use the GC Tooth Mousse twice a day – morning and evening after tooth brushing. During orthodontic treatment, apply the Tooth Mousse around the areas of the braces.

Storage

For optimal performance, store in a dry location at room temperature (8-25°C). Do not use the Tooth Mousse after the expiry date as stated on the package.

Caution


1. Replace cap immediately after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with the skin, remove immediately by a wet cloth or gauze.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use in case of proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

RECALDENT™ is a registered trademark and is manufactured under license of Recaldent Pty. Ltd.

INSTRUCTIONS FOR USE

הוראות שימוש

تعليمات الاستخدام

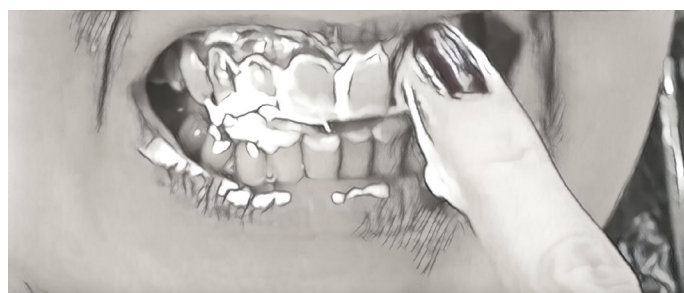

GC Tooth Mousse

מוס לשיניים, ללא סוכר, על בסיס
מיס, המכיל Recaldent™ CPP-ACP
(Casein Phosphopeptide -
Amorphous Calcium Phosphate)

הרכב המוס:

Pure water, glycerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Propylene glycol, Silicon dioxide, titanium dioxide, Xylitol, Phosphoric acid, Flavoring, Zinc oxide, Sodium saccharin, ethyl p hydroxybenzoate, Magnesium oxide, Guar gum, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p hydroxybenzoate.

התוויות לשימוש:

1. למניעת רגישות לאחר הסרת אבנית.
2. למניעת רגישות בטרם או לאחר טיפול הבהרת שיניים ("הלבנה").
3. לנשים בהריון הסובלות מרמת pH ברוק נמוכה מהרגיל.
4. לסובלים מיובש פה עקב טיפולים רפואיים או כתופעת לוואי של נטילת תרופות.
5. לטיפול בכתמים לבנים על השיניים.
6. במהלך טיפול ליישור שיניים (סמכים / פלטה) או לאחריו.
7. למתרפאים בסיכון גבוה לפתח עששת או בעלי רמת pH נמוכה ברוק.
8. להגנה על השיניים עבור מתרפאים הצורכים משקאות בעלי רמת חומציות גבוהה באופן תדיר (כגון משקאות אנרגיה ומשקאות מוגזים).
9. במתרפאים הסובלים משיניים רגישות.

התוויות-נגד לשימוש:

Recaldent™ CPP-ACP מופק מקזאין החלב. אין להשתמש במקרים של אלרגיה או חשד לאלרגיה לחלבוני חלב (Lactose Intolerance) או לחומרי שימור על בסיס Benzoate.

הנחיות שימוש בקרם השיניים:

1. בטרם השימוש יש לחצח את השיניים היטב באמצעות מברשת שיניים

GC Tooth Mousse

מוס للأسنان بدون سكر يحتوي
على Recaldent™ CPP-ACP
(Casein Phosphopeptide -
Amorphous Calcium Phosphate)

مكونات الموش:

Pure water, glycerol, CPP-ACP, D-sorbitol, CMC-Na, Propylene glycol, Silicon dioxide, titanium dioxide, Xylitol, Phosphoric acid, Flavoring, Zinc oxide, Sodium saccharin, ethyl p hydroxybenzoate, Magnesium oxide, Guar gum, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p hydroxybenzoate.

لماذا يستخدم موش الأسنان:

1. لمنع تحسس الأسنان بعد تنظيف الترسبات الجيرية.
2. لمنع تحسس الأسنان بعد تبييضها.
3. لحماية الأسنان في حال الحمل وازدياد حموضة الفم عن الوضع الطبيعي.
4. في حالات جفاف الفم الحاصلة بعد العلاجات الطبية أو التدوي بأدوية معينة.
5. لعلاج البقع السنية البيضاء.
6. خلال أو بعد علاج تقويم الأسنان.
7. لحماية الأسنان للمرضى ذوي احتمالية تسوس عالية أو لمن لديهم حموضة عالية.
8. لحماية أسنان المرضى المستهلكين لمشروبات الطاقة.
9. للأسنان الحساسة.

يمنع استخدام الموش في حالة:

يحتوي الموش على كازين الحليب - البروتين الأساسي في الحليب - لذا يمنع استخدامه لمن لديهم حساسية لبروتينات الحليب أو لمن لديهم حساسية للمواد الألفطة على أساس البنزوات - Benzoate.

كيفية استخدام الموش:

1. يتم تفريش الأسنان باستخدام الفرشاة والمعجون العادي.
2. ضع كمية كافية من الموش

- على أصبع (نظيف وناشف) وادهنه على الأسنان.
3. انتظر لمدة ثلاث دقائق متجنباً بلع الريق أو البصق.
4. ادهن بلسانك ما تبقى من الموش على الأسنان.
5. يتم بصق زوائد الموش الكبيرة. تذوب بقايا الموش المتبقية بالتدريج. عليك بالامتناع عن الأكل والشرب لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل. كلما زادت هذه الفترة زاد تأثير الموش على الأسنان وازدادت فعاليته.

انتظام استخدام الموش:

يتم استخدام الموش مرتين يومياً، صباحاً ومساءً بعد تفريش الأسنان إذا كنت تخضع لعلاج تقويم الأسنان، ادهن الموش أيضاً حول حبات التقويم المثبتة على الأسنان.

كيفية التخزين

تخزن المادة بمكان جاف وبارد بدرجة (٨ - ٢٢ سيليسيوس). لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج على ظهر العبوة.

تحذيرات

1. أغلق العبوة فوراً بعد الاستخدام، ونظف فتحة العبوة من بواقي المعجون.
2. في حال ملامسة المادة للجلد، نظفها فوراً بالشاش أو بقط مبلولة.
3. في حال ملامسته للعين، اغسله جيداً بالماء وتوجه فوراً للطبيب.
4. يحتوي الموش على كازين الحليب - البروتين الأساسي في الحليب - لذا يمنع استخدامه لمن لديهم حساسية لبروتينات الحليب.

Recaldent™ هي علامة تجارية، وتصنع بترخيص من Recaldent Pty. Ltd.

كتبت الكتابة أعلاه بلسان الذكر للسهولة فقط، وهي موجهة للجنسين، بدون تمييز.